

《歯科エキスパートシステム お試し版のインストール方法》

ここでは、歯科エキスパートシステム お試し版のインストール手順について説明しています。

インストールを始める前に必ず【注意事項】をお読みください。

【注意事項】

- ・ 他社のレセコンソフトを利用しているコンピュータにはインストールしないでください。歯式を表す文字には Windows にない特殊な文字が多いため、各社独自に外字ファイルを登録し利用している場合があります。この外字ファイルが上書きされ、正しく動作しなくなる場合があります。
- ・ 歯科エキスパートシステムは Windows2000 SP4 以上 / WindowsXP HomeEdition SP2 以上 / WindowsXP Professional SP2 以上 / WindowsVista SP1 以上で動作します。
- ・ WindowsXP Professional x64Edition などの 64 ビット版の OS では正しく動作いたしません。
- ・ Internet Explorer 6.0 SP1 以上がインストールされている必要があります。
- ・ **お試し版はインストール日から 1 年間利用できるようになっております。**


【注意事項】をお読みになり、下記の手順に従い、インストールを行ってください。

(1) WindowsVista ご利用の場合は UAC を無効にする


WindowsVista をご利用の場合は UAC を以下の手順にしたがって無効にしてください。Windows2000/WindowsXP をご利用の場合にはこの作業は不要です。

[スタート]ボタン→[コントロールパネル]→[ユーザーアカウント]→[ユーザーアカウント]→[ユーザーアカウント制御の有効化または無効化]で表示される[ユーザーアカウント制御(UAC)を使ってコンピュータの保護に役立たせる]のチェックボックスのチェックが ON の場合は OFF にし、[OK]ボタンを押してください。コンピュータの再起動を要求されますので指示に従ってコンピュータを再起動してください。

(2) 歯科エキスパートシステムをインストールする

「01Ver?????歯科E x お試し版インストーラ」というフォルダがあります。そのフォルダの中に、「 TrialSetupExpert.EXE」というファイルがありますので、ダブルクリックして手順に従って実行してください。

①下記の画面では「次へ」をクリックします。

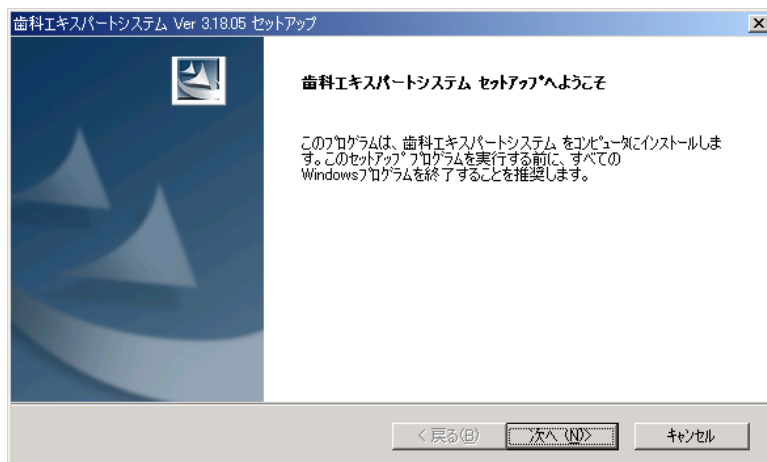

②画面の指示に従い、インストールを進めてください。

- ・ インストール時の県選択で[他県]を選択した場合は新潟版と同様の設定となります。

③インストール完了後、コンピュータを再起動します。

(3) 歯科エキスパートシステムをバージョンアップする

「03 バージョンアップ」というフォルダがあります。そのフォルダの中に、「Ver?????.EXE」という**ファイルがある場合**は?????の数字の部分小さい順に、ダブルクリックしてバージョンアップを実行してください。
「03 バージョンアップ」フォルダ内に、**ファイルが1つも存在しない場合**は、前述の歯科エキスパートシステムのインストール作業で最新バージョンが提供されていますのでバージョンアップを行う必要はありません。

(4) お使いのコンピュータの環境を確認し必要であれば変更します。

【Internet Explorer 7 設定の確認】

Internet Explorer 7 がインストールされているコンピュータをお使いの場合、以下の設定変更作業を行ってください。Internet Explorer 7 がインストールされていない場合はこの作業を行う必要はありません。


- ・ [コントロールパネル]→[インターネットオプション]で[インターネットのプロパティ]画面を開き [セキュリティ]タブ→[ローカルイントラネット]を選択し[サイト]ボタンをクリックし[ローカルイントラネット]画面を開く チェックボックスを以下のように変更し[OK]ボタンで閉じて再起動する

イントラネットのネットワークを自動的に検出する : OFF

ほかのゾーンにないローカル(イントラネット)のサイトをすべて含める : ON

プロキシサーバーを使用しないサイトをすべて含める : ON

すべてのネットワークパス(UNC)を含める : ON

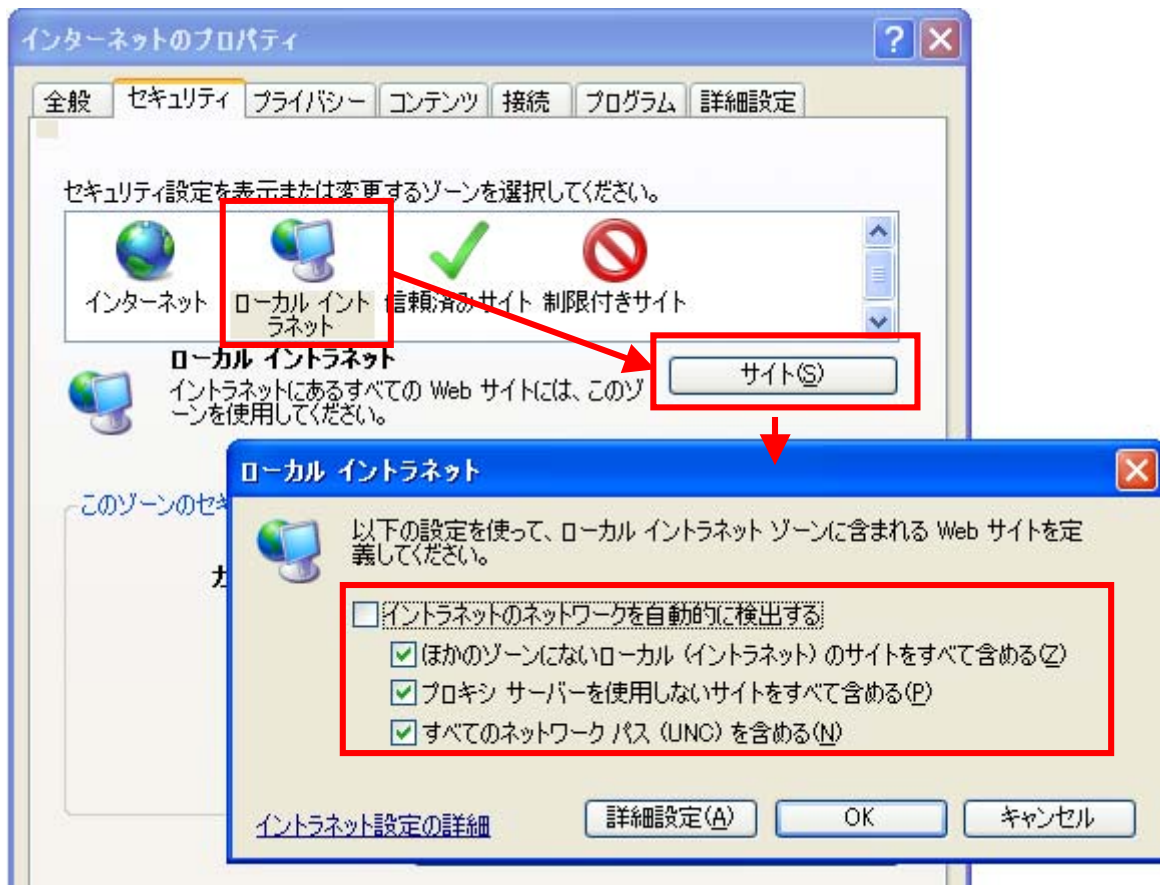




(5) 医療辞書の登録をする

このドキュメントではWindowsに標準で用意されている カナ漢字変換ソフト IME での辞書登録の方法を説明しています。他のカナ漢字変換ソフト (ATOK など) をご利用の場合は、IME で登録されている辞書を取り込む機能がそなわっている場合がありますので、そちらを参照してください。他のカナ漢字変換ソフトで IME の辞書を取り込む方法や使用方法については、お使いのカナ漢字変換ソフトのメーカーへお問い合わせください。

① IME 辞書ツールを起動します。

【Windows 2000 の場合】

- IME ツールバー  の  (プロパティ) をクリックします。
[Microsoft IME 2000 のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。
- [辞書/学習] タブをクリックします。
-  (辞書ツール) をクリックします。

【Windows XP の場合】


- IME ツールバー  の  (ツール) をクリックし、[辞書ツール] をクリックします。

【Windows Vista の場合】


- IME ツールバー  の  (ツール) をクリックし、[辞書ツール] をクリックします。

② テキストファイルから医療辞書を追加します。

- [ツール] → [テキストファイルからの登録] を選択します。

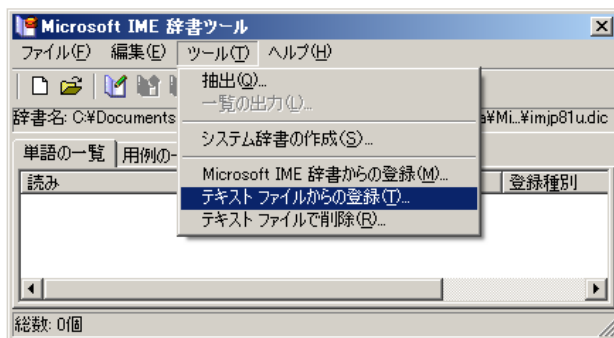

- [ファイルの場所] の [▼] をクリックして「04 医療辞書」フォルダを選択します。「医療辞書.txt」が表示されるので「医療辞書.txt」を選択して開くボタンを押してください。

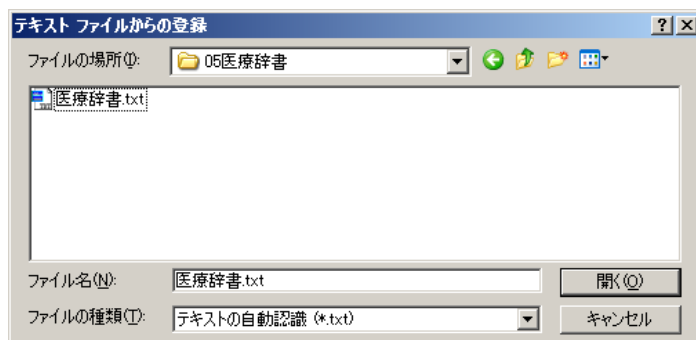

(6) Adobe Reader をインストールする

お使いのマシンに Adobe Reader がインストールされていない場合は Adobe Reader をインストールしてください。マニュアルを参照する場合などに必要になります。

① 既にインストールされているかどうか確認する方法は以下です。

「09 マニュアル」フォルダ内に以下のアイコンが表示されているようであれば、既にインストールされています。表示されていないようであれば、次の②へ進みインストールを実行してください。



② Adobe Reader をインストールします。

最新の Adobe Reader をインターネットなどから取得できるか方はそちらをご利用ください。できない方は以下を参考にインストールをしてください。


「05AdobeReadr インストーラ」というフォルダがあります。そのフォルダの中に、「Ver8.1」というフォルダがあります。そのフォルダの中に「AdbeRdr810_ja_JP.exe」というファイルがありますので、ダブルクリックして手順に従って実行してください。

(7) 歯科エキスパートシステムで使用するプリンタを指定してください

プリンタの設置や接続やプリンタドライバのインストール方法はご使用されるプリンタの説明書を参照してください。問題がある場合はプリンタの製造メーカーへお問い合わせください。

ここでは歯科エキスパートシステムで使用するプリンタをどれにするか設定する方法について説明していません。設定せずに使用した場合、印刷時に問題が発生する可能性があります。必ずこの作業をおこなってください。

- ・ [診療入力]画面メニューバーの[環境設定]→[全体システム設定]をクリックして「全体システムの設定」画面を起動します。以下の画面が表示されますので[プリンタ設定]から使用するプリンタを選択して[更新]ボタンをおしてください

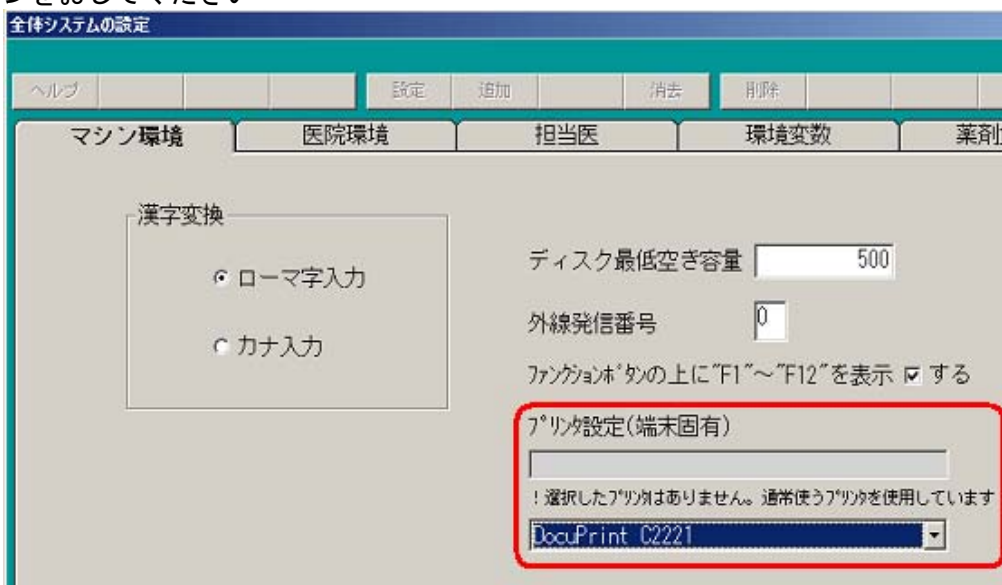

以上で、インストール作業は完了です。

ご利用方法は「09 マニュアル」というフォルダに保存されている、各種 PDF 文書をご覧ください。

注 1) お試し版はインストール日から 1 年間利用できるようになっております。