


《歯科エキスパートシステムーパソコン共通設定手順》

★歯科エキスパートシステムを使いやすくするために、親機と子機全てでパソコン側の各設定変更を行います。

★はじめに、[コントロールパネル]を表示して、下図のように[表示方法]を[小さいアイコン]に変更します。

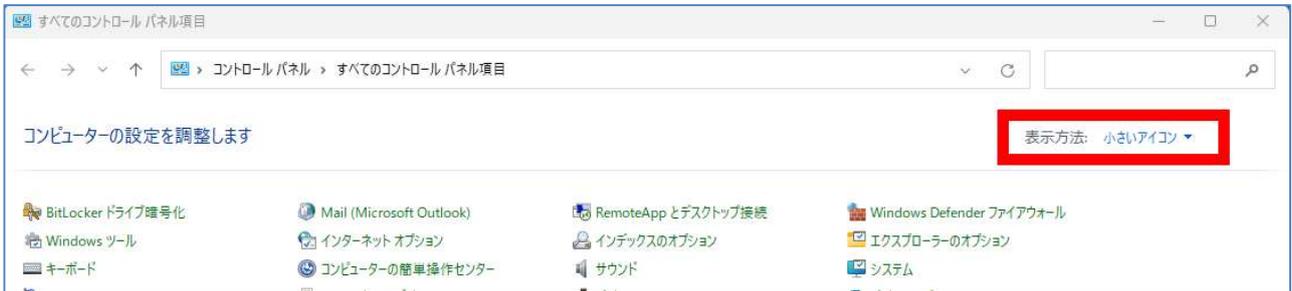

(1) ユーザーアカウントが半角英数字となっているか確認する


下記の確認方法で、コンピュータを利用しているユーザーアカウントが『半角英数字』となっていることを確認します。『漢字』、『ひらがな』、『カタカナ』、『全角英数字』などの全角文字が1文字でも利用されているとインストール途中でエラーが発生しインストールが失敗します。

① [Windows タスクマネージャ]を以下の手順で表示します。

Windows 10 / 11 の場合

[Ctrl]+[Alt]+[Del]キーを押してから[タスクマネージャー]を選択する

② [ユーザー]タブで現在コンピュータを利用しているユーザーアカウントが『半角英数字』となっていることを確認します。

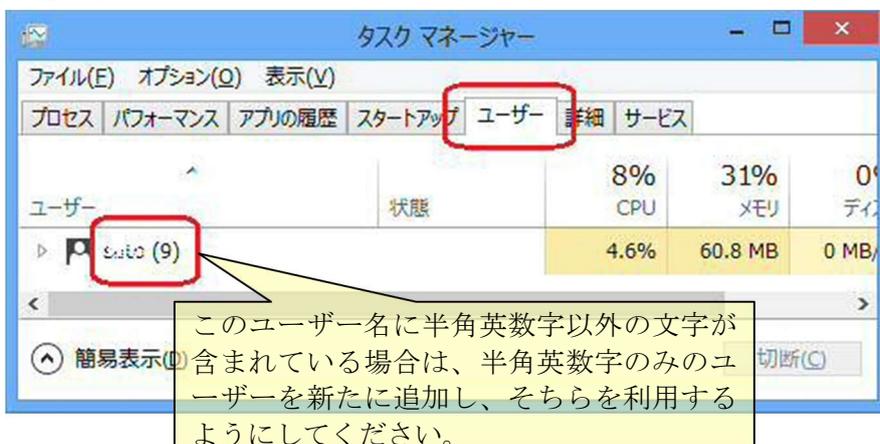

(2) [インターネットのプロパティ]の設定変更 (対象 OS: Windows 10 / 11)


- ①[コントロールパネル]→[インターネットオプション]をクリックします。
- ②[インターネットのプロパティ]画面から[セキュリティ]タブ→[ローカルイントラネット]を選択します。
- ③[サイト]ボタンをクリックし[ローカルイントラネット]画面を開きます。
- ④チェックボックスを以下のように変更し[OK]ボタンで閉じて再起動します。

イントラネットのネットワークを自動的に検出する : OFF

ほかのゾーンにないローカル(イントラネット)のサイトをすべて含める : ON

プロキシサーバーを使用しないサイトをすべて含める : ON

すべてのネットワークパス(UNC)を含める : ON

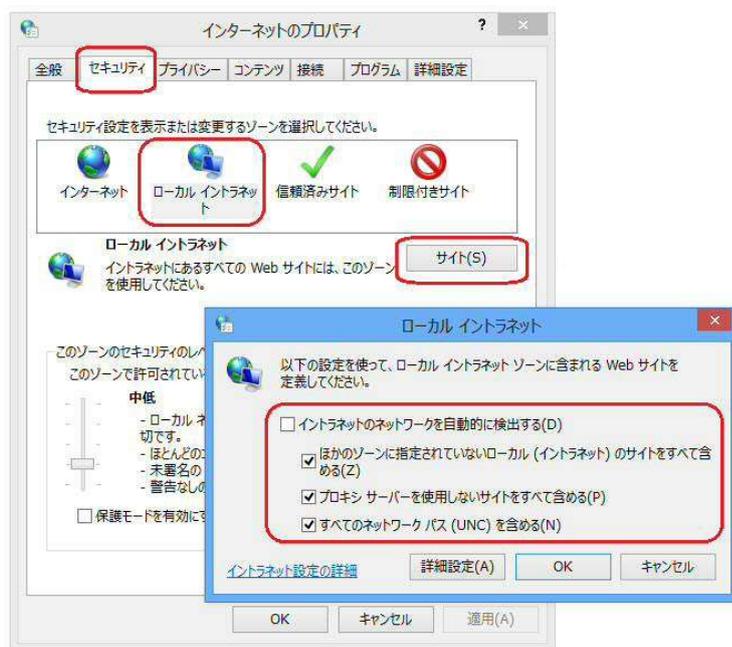

(3) ショートカットキーに下線を表示 (対象 OS: Windows 10 / 11)

[コントロールパネル] → [コンピューターの簡単操作センター] → [キーボードを使いやすくします] を開きます。

[ショートカットキーとアクセスキーに下線を表示します] にチェックを付け、[適用] → [OK] ボタンを押して閉じます。

(4) 入力方法を変更する (対象 OS: Windows 10 / 11)

[コントロールパネル] → [言語] → [詳細設定] → [アプリウィンドウごとに異なる入力方式を設定する] にチェックを付け、[保存]ボタンを押して閉じます。

(5) 通常使うプリンターの管理について (対象 OS: Windows 10 / 11)

[スタート] → [設定] → [デバイス] → [プリンターとスキャナー] にある [Windows で通常使うプリンターを管理する(有効にすると、最後に使ったプリンターが通常使うプリンターになります。)] のスイッチをオフにします。

(6) 電源プランの変更 (対象 OS: Windows 10 / 11)

電源プランは購入時 [バランス] や [ECO] などに設定されており、一定時間が経過するとハードディスクやモニタが待機状態に入るように設定されています。待機状態に入ると歯科エキスパート動作上エラーが発生することや、動作が遅く感じる場合があります。よってこの設定を待機状態にならないように設定変更します。

[コントロールパネル] → [電源オプション] を開きます。

[電源オプション] → [高パフォーマンス] の [プラン設定の変更] を選択



[プラン設定の編集] 画面内にて

ディスプレイの電源を切る 適用しない
コンピューターをスリープ状態にする 適用しない へ変更する。



更に詳細な設定を変更します。[プラン設定の編集] 画面内にある [詳細な電源設定の変更] を選択します。

※ [現在利用できない設定の変更] が表示されている場合は同部分クリックして編集できるようにしてください。




各項目を変更します

(編集する際は左端口の中の+をクリックすると展開され編集できます)


高パフォーマンス

復帰時のパスワードを必要とする 設定: いいえ

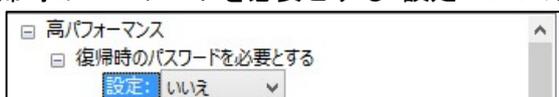

ハードディスク

次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る 設定：なし

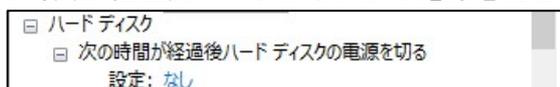


スリープ

次の時間が経過後スリープする 設定：なし


ハイブリッドスリープを許可する 設定：オフ

次の時間が経過後休止状態にする 設定：なし

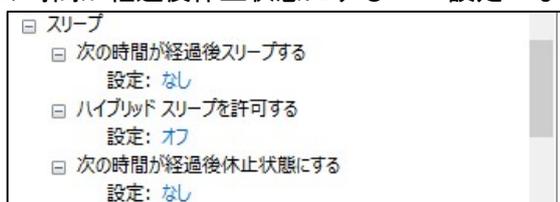


ディスプレイ

次の時間が経過後ディスプレイの電源を切る 設定：なし

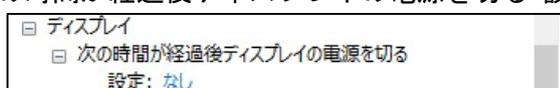


上記設定が完了したら [適用] ボタンを押し [OK] ボタンを押す

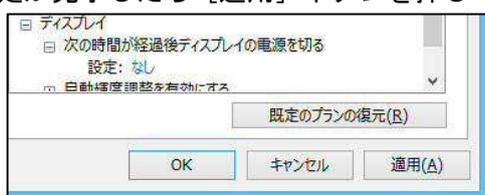

[プラン設定の編集] 画面に戻るので [変更の保存] を押す



[電源オプション] に戻るので、高パフォーマンスに○チェックを入れて画面を右上×で閉じます。

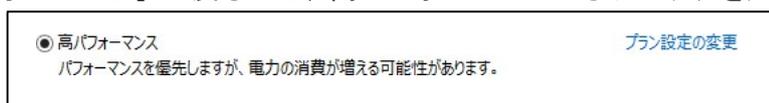


(7) 電源オプションの変更 追加設定 (対象 OS: Windows 10 / 11)

[コントロールパネル] → [電源オプション] → [電源ボタンの動作を選択する] を選択します。



[システム設定]

「現在利用可能でない設定を変更します」が表示されている場合は同部分をクリックして編集できるようにしてください。

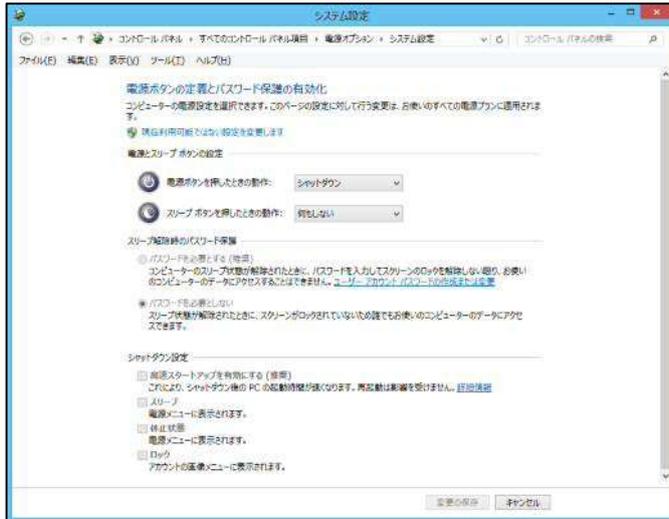

電源とスリープボタンの設定

電源ボタンを押した時の動作 : シャットダウン 選択

スリープボタンを押した時の動作 : 何もしない 選択

スリープ解除時のパスワード保護

パスワードを必要としない : チェックオン

シャットダウン設定

高速スタートアップを有効にする : チェックオフ

スリープ : チェックオフ

休止状態 : チェックオフ

ロック : チェックオフ

以上で、歯科エキスパートシステムーパソコン共通設定手順の作業については完了となります。